



orava

FB-11

Návod na použitie

SK

Sonický čistiaci a
masážny prístroj na tvár

Určený účel použitia zariadenia

Zariadenie je určené výlučne na ošetrovanie - čistenie a masáž jemnej pokožky tváre a krku osôb, v rozsahu, ktorý je stanovený technickými a prevádzkovými parametrami a funkciami, bezpečnostnými a užívateľskými pokynmi a vonkajšími vplyvmi prevádzkového prostredia.

Elektrické spotrebiče ORAVA sú vyrobené podľa poznatkov súčasného stavu techniky a uznaných bezpečnostno-technických pravidiel. Napriek tomu môže nesprávnym a neodborným používaním alebo používaním v rozpore s určením vzniknúť nebezpečenstvo poranenia alebo ohrozenia života používateľa alebo tretej osoby, resp. poškodenie zariadenia a iných vecných hodnôt.

Bezpečnostné pokyny na používanie

- Elektrické zariadenie je navrhnuté a vyrobené takým spôsobom, aby umožňovalo bezpečnú obsluhu a používanie osobami bez odbornej kvalifikácie. Aj napriek všetkým opatreniam, ktoré boli výrobcom vykonané pre bezpečné používanie, obsluhu a používanie nesú so sebou určité zostatkové riziká a s nimi spojené možné nebezpečenstvá.
- Pre upozornenie na možné nebezpečenstvá boli na zariadení a v sprievodnej dokumentácii použité nasledujúce symboly a ich význam:



Tento symbol upozorňuje používateľov, že pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri používaní a obsluhu zariadenia hrozí:

Nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!

Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo inej škody na majetku!

Všeobecné pokyny a upozornenia

- Pred uvedením zariadenia do prevádzky Vám odporúčame pozorne si preštudovať návod na obsluhu a zariadenie obsluhovať podľa stanovených pokynov!
- Bezpečnostné pokyny a upozornenia uvedené v tomto návode nezahŕňajú všetky možné podmienky a situácie, ku ktorým môže pri používaní zariadenia dôjsť. Používateľ musí pochopiť, že faktorom, ktorý nie je možné zabudovať do žiadneho z výrobkov, je osobná zodpovednosť a opatrnosť. Tieto faktory teda musia byť zaistené používateľmi obsluhujúcimi toto zariadenie.
- Nedodržaním bezpečnostných pokynov a upozornení výrobcu nezodpovedá za akékoľvek vzniknuté škody na zdraví alebo majetku!
- Návod na obsluhu udržiavajte podľa možnosti v blízkosti zariadenia počas celej doby jeho životnosti. Návod na obsluhu vždy uchovávajte spolu so spotrebičom pre jeho použitie v budúcnosti a použitie novými používateľmi.
- Zariadenie používajte výhradne na určený účel a spôsobom, ktorý je stanovený výrobcou.
- Nejde o profesionálne zariadenie na komerčné použitie.
- Nemeňte technické parametre a charakteristiky zariadenia neautorizovanou zmenou či úpravou akejkoľvek časti zariadenia.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené počas prepravy, nesprávnym používaním, poškodením alebo zničením zariadenia vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok.

Bezpečnosť prevádzkového prostredia

- Nepoužívajte zariadenie v priemyselnom prostredí ani vo vonkajšom prostredí!
- Zariadenie nevystavujte účinkom:
 - zdrojov nadmerného tepla alebo otvoreného ohňa,
 - vibrácií a nadmerného mechanického namáhania,
 - hmyzu, živočíchov a rastlínstva,
 - agresívnych a chemických látok.

- Prevádzkové prostredie zariadenia musí byť vždy v súlade so stanovenými základnými charakteristikami.

Charakteristiky prevádzkového prostredia:

1. Teplota okolia: $+5 \div +40$ °C
2. Vlhkosť: $5 \div 85$ %
3. Nadmorská výška: $\leq 2\,000$ m
4. Výskyt vody: občasná kondenzácia vody alebo výskyt vodnej pary
5. Výskyt cudzích telies: množstvo a druh prachu sú nevýznamné
6. Stupeň ochrany krytom: IPX7 (zariadenie je chránené proti ponoreniu do vody (počas 30 min. v hĺbke 1 meter).

Elektrická bezpečnosť

- Elektrické zariadenia triedy ochrany III sú také zariadenia, ktoré sú napájané pomocou zdroja malého bezpečného napätia (batériou alebo akumulátorom) a z hľadiska úrazu elektrickým prúdom nepredstavujú pre používateľa žiadne nebezpečenstvo.

Bezpečnosť osôb

- Tento spotrebič je určený na používanie a obsluhu osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie - laikmi, podľa pokynov určených výrobcom.
- Obsluhu zariadenia náležia činnosti, ako je zapínanie a vypínanie zariadenia, používateľská manipulácia a nastavovanie prevádzkových parametrov, vizuálna alebo sluchová kontrola zariadenia a používateľské čistenie a údržba.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností alebo znalostí, ak sú pod dozorom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a porozumeli nebezpečenstvu, ktoré je s tým spojené.
- Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
- Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Čistenie, údržba a opravy

- Bežné používateľské čistenie a údržbu elektrického spotrebiča vykonávajte len odporúčeným spôsobom. Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani drsné čistiace predmety. Znečistenie a viditeľné škvryny od dotyku prstov, resp. rúk je možné vyčistiť použitím čistiacich prostriedkov, navrhnutých na čistenie domácich spotrebičov.
- Elektrické časti očistite len navlhčenou tkaninou a utrite do sucha alebo nechajte uschnúť.
- Zariadenie udržiajte v čistom a suchom stave.
- Elektrický spotrebič nerozoberajte!
- Elektrický spotrebič nikdy svojpomocne neopravujte!

Rozbalenie

- Zariadenie a príslušenstvo pred jeho uvedením do prevádzky vybalte a zbavte všetky jeho časti zvyškov obalových materiálov, etikiet a štítkov.
- Obalové materiály odložte na bezpečné miesto alebo uschovajte predovšetkým mimo dosahu detí a nespôsobilých osôb.

Kontrola/Uvedenie do prevádzky

- Odporúčame vykonať prvotnú aj následné pravidelné kontroly zariadenia. Zariadenie používajte iba s príslušenstvom dodávaným a schváleným výrobcom.
- Zariadenie nikdy nepoužívajte, pokiaľ je neúplné, poškodené alebo v priebehu používania došlo k poškodeniu jeho častí alebo príslušenstva (napr. následkom pádu).
- Elektrické časti očistite len navlhčenou tkaninou a utrite do sucha alebo nechajte uschnúť.
- Zariadenie udržiajte v čistom a suchom stave.

Prevádzka/Používanie

Upozornenie!

- Zariadenie na ošetrovanie pokožky tváre a krku bolo navrhnuté, aby umožňovalo hĺbkové, ale šetrné čistenie a odstránenie nečistôt z povrchu pokožky tváre a krku. Zároveň poskytuje pohodlnú a jemnú masáž pokožky a zanecháva pocit čistoty a sviežosti.
- Prístroj na čistenie pokožky tváre je niekoľkokrát efektívnejší ako manuálne čistenie.
- Pomocou jemnej silikónovej hlavice prístroj odstraňuje odumreté bunky z pleti, čistí póry, odstraňuje zvyšky mejkapu. Zároveň pomáha zvyšovať cirkuláciu krvi, redukuje vrásky a pomáha odstraňovať kruhy pod očami.

Výstraha!

- Zariadenie je určené na osobné používanie a osobnú hygienu.
- S ohľadom na túto skutočnosť sa neodporúča, aby zariadenie používali rôzne osoby.
Hrozí nebezpečenstvo prenosu dermatologického ochorenia!

Výstraha!

- Zariadenie používajte s maximálnou opatrnosťou. Predovšetkým:
 - na miestach s tmavohnedými alebo čiernymi škvrnami, ako sú napríklad veľké pehy, materské znamienka, pluzgieriky alebo bradavice a pod.,
 - na miestach postihnutých ekzémom, lupienkou, s otvorenými ranami alebo inými akútnymi kožnými infekciami,
 - na popraskanej alebo inak poškodenej pokožke.
- O vhodnosti použitia zariadenia a prostriedkov na ošetrovanie pokožky tváre sa poraďte so svojim lekárom alebo lekárom špecialistom.
Hrozí nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia!

Upozornenie!

- Nepoužívajte zariadenie v tej istej oblasti pokožky viac ako dvakrát za deň.
- Dodržujte pravidelné intervaly zmeny oblasti tváre pri používaní zariadenia. Odporúča sa používať interval maximálne 1 minútu na jednu oblasť pokožky tváre.
- Tvár môžeme rozdeliť približne na 3 oblasti: 1. čelo a nos, 2. ľavá strana tváre, 3. pravá strana tváre.

- Nepoužívajte zariadenie s prostriedkami na čistenie obsahujúcimi dráždivé látky alebo drsné mikročastice.
- Ak pri používaní pocítite akýkoľvek nepriaznivý účinok zariadenia na stav pokožky vašej tváre, okamžite prestaňte toto zariadenie používať a kontaktujte svojho lekára.

Výstraha!

- Nepoužívajte zariadenie na čistenie pokožky v tesnej blízkosti očí. Neopatrná manipulácia môže spôsobiť vážne poranenie.

Upozornenie!

- V prípade, že zariadenie následne vykazuje známky nesprávnej funkcie alebo poškodenia, odneste ho na kontrolu do odborného servisu.
- Zariadenie nikdy nepreťažujte nad limity stanovené technickými parametrami!
- Režim prevádzky zariadenia (čas prevádzky/činnosti a prestávky) dodržujte podľa pokynov na obsluhu a používanie. Zariadenie pravidelne čistite. Znečistenie zariadenia môže mať za následok zníženie prevádzkových parametrov a možné následné nevratné poškodenie.
- Pokiaľ je súčasťou zariadenia akákoľvek bezpečnostná časť/súčasť (mechanická, elektrická), nikdy nevyraďujte túto časť/súčasť z činnosti! Ak je bezpečnostná časť/súčasť poškodená alebo nefunkčná, zariadenie nepoužívajte!

Čistenie prístrojov určených na starostlivosť o ľudské telo

- Používanie zariadení určených na starostlivosť o ľudské telo prináša so sebou aj nutnosť vykonávať pravidelné a dôkladné čistenie týchto zariadení a ich príslušenstva.
- Tento odsek uvádza dôležité základné postupy pri čistení prístrojov a ich príslušenstva, určených na starostlivosť a ošetrovanie častí ľudského tela pri opakovanom používaní.

Upozornenie!

- Nedovoľte iným osobám používať prístroj na starostlivosť o ľudské telo, predovšetkým prístroj určený na osobnú hygienu, resp. osobné používanie.

- Pri používaní a čistení prístrojov na ošetrovanie častí ľudského tela dodržujte nasledovný postup a pokyny:
 - Pred každým použitím prístroja tento vždy dôkladne skontrolujte, či nie je poškodený, či správne funguje a či je vo vyhovujúcom hygienickom stave.
 - Po každom použití prístroja všetky časti a plochy prístroja a jeho príslušenstva, ktoré boli znečistené zvyškami pleťového čistiaceho prostriedku (napr. čistiaceho gélu a pod.), dôkladne otrite napr. do suchej papierovej utierky – hrubé suché čistenie.
 - Po odstránení hrubého znečistenia naneste na príslušenstvo zariadenia vhodný čistiaci prostriedok (vhodný koncentrát čistiaceho prostriedku na odstránenie zvyškov biologických častíc a odmastenie povrchov čistiacich štetín nadstavca – čistiaci a prípadne aj dezinfekčný prostriedok určený na ošetrovanie hygienických pomôcok) a tieto časti dôkladne ručne prečistíte (vytváraním primeraného tlaku prstami ruky a trením čistiacich štetín).
 - Po ukončení čistenia príslušenstvo dôkladne opláchnite pod tečúcou, čistou a teplou vodou.
 - Všetky časti zariadenia a príslušenstvo utrite do sucha alebo nechajte uschnúť.
- Pre dôkladné očistenie príslušenstva zariadenia od zvyškov nečistôt je často nutné tento postup aj viackrát zopakovať.
- Pre dosiahnutie vyššieho účinku v procese čistenia príslušenstva prístroja sa odporúča použitie vhodného dezinfekčného prostriedku, používaného v oblasti dezinfekcie ľudskej kože.
- Správne a dôkladné čistenie príslušenstva prístrojov na starostlivosť o ľudské telo je dôležitým predpokladom na udržanie týchto častí v prijateľnom hygienickom stave a dosiahnutie čo najdlhšej prevádzkovej životnosti.
- Nikdy nepodceňujte možné nebezpečenstvá a dbajte na zvýšenú opatrnosť!!!

Informácie o zariadení

- Zdravý a ekologicky šetrný silikónový povrch.
- Stupeň ochrany 7, zariadenie môže byť umyté vodou.
- Vysokofrekvenčná vibračná technológia čistenia vytvára ultrazvukové vlny prenikajúce cez povrch kože do hlbšej vrstvy a odstráni nečistoty z pórov.
- 5 stupňov nastavenia intenzity vibrácií. Pri zapnutí je nastavená tretia úroveň intenzity, ktorú môžete nastaviť podľa svojich potrieb.
- Mäkké silikónové dotykové hroty s vysokou hustotou sú citlivé voči pokožke.


Napájanie

Zariadenie je napájané zo vstavanej Li-ion batérie 250 mAh, 3,7 V. Batéria sa nabíja z vhodného AC adaptéra s jednosmerným výstupným napätím 5 V, 500 - 1 000 mA pomocou dodávaného nabíjacieho kábla s USB konektorom a minikonektorom.

AC adaptér pripojte do elektrickej zásuvky, USB konektor kábla pripojte k AC adaptéru a minikonektor pripojte do minikonektora na zariadení.

Zariadenie môžete napájať aj z PC po prepojení PC a tohto zariadenia dodávaným káblom.

Popis častí

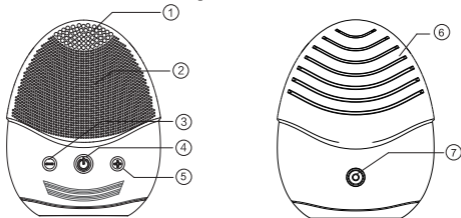

- 1 Detailná čistiaca zóna
- 2 Všeobecná čistiaca zóna
- 3 Tlačidlo znižovania intenzity vibrácií (-)
- 4 Tlačidlo zapnutia/vypnutia (⏻)
- 5 Tlačidlo zvyšovania intenzity vibrácií (+)
- 6 Masážna zóna
- 7 Napájací minikonektor
(prípojenie dodávaného kábla a vhodného napájacieho AC adaptéra)

Prevádzka

1 Pred prvým použitím zariadenie nabite.

Zapojte minikonektor dodávaného kábla do napájacieho minikonektora na tomto zariadení (7) a druhý USB konektor do USB konektora na voliteľnom AC adaptéri (jednomerné výstupné napätie 5 V, 500 - 1 000 mA) alebo do USB konektora na zapnutom PC. AC adaptér zapojte do elektrickej zásuvky.

2 Počas nabíjania bude svietiť červený LED indikátor nabíjania a keď zhasne, batéria je úplne nabitá. Odpojte zariadenie zo zdroja nabíjania a môžete ho používať.

3 Navlhčite si tvár vodou a aplikujte čistiaci prostriedok na tvár alebo na čistiacu zónu zariadenia.

4 Stlačením stredného tlačidla zapnete zariadenie a pomocou tlačidiel +/- nastavte želanú intenzitu vibrovania.

Predvolená intenzita je na stredný - tretí - stupeň z piatich dostupných, aby vyhovovali komfortu individuálneho používateľa a účinnosti.

5 Zapnuté zariadenie jemne pritláčajte na pleť niektorou z čistiacich zón, ak chcete pleť čistiť, alebo masážnou zónou, ak chcete pleť namasírovať, a pohybujte zariadením po pleti malými krúživými pohybmi.

6 Po skončení používania opätovným stlačením stredného tlačidla zariadenie vypnete.

Riešenie problémov

Upozornenie!

Ak sa vyskytnú nejaké problémy s týmto zariadením, pokúste sa ich odstrániť pomocou tohto prehľadu. Ak opatrenia nepomôžu, nepokúšajte sa odstrániť kryt zariadenia alebo opraviť ho sami.

Zariadenie nefunguje

Skontrolujte, či je zariadenie nabité. Ak nie je nabité, nabite ho.

Ak sa zariadenie nedá nabiť, overte si, či na nabíjanie používate správny AC adaptér (nedodávaný).

Čistenie a údržba

Čistenie povrchu zariadenia

Na čistenie povrchu, panela, ovládacích prvkov a masážnej/čistiacich zón použite jemnú handričku, mierne navlhčenú v jemnom čistiacom roztoku. Nepoužívajte drsné handričky, čistiace prášky, ani rozpúšťadlá, ako riedidlo, benzín alebo lieh.

Nepoužívajte čistiace prostriedky na báze hliníka, silikónu alebo zrnitých čistiacich prostriedkov, pretože môžu poškodiť mäkké silikónové dotykové hroty zariadenia.

Technické údaje

Všeobecne

Napájanie (nabíjanie):	voliteľný AC adaptér s výstupným jednosmerným napätím 5 V, 500 - 1 000 mA (nedodávaný) vstavaná Li-ion batéria, 250 mAh, 3,7 V
Rozmery:	78 x 60 x 30 mm
Hmotnosť:	59 g
Hlučnosť:	50 dB

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 50 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Dodávané príslušenstvo:	návod na obsluhu (1) nabíjací kábel (1)
--------------------------------	--------------------------------------------

Právo na zmeny vyhradené!

Výrobca:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberínho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Dovozca:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberínho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA distribúcion CZ, s.r.o.
Ostravská 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

Odpad z elektrických a elektronických zariadení - nariadenie Európskej únie 2002/96/EC a upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu

Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispějete tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia.

Toto zariadenie je označené podľa európskeho nariadenia 2002/96/EC o elektrickom odpade a elektronickom vybavení (WEEE). Táto smernica tvorí rámec celoeurópskej odôvodnenosti o zbere a recyklácii elektrického odpadu a elektronického vybavenia.



Tento výrobok zodpovedá všetkým základným požiadavkám smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.